


camerajet

Gap Optical Targeting™ teknolojisiyle geliştirilmiştir

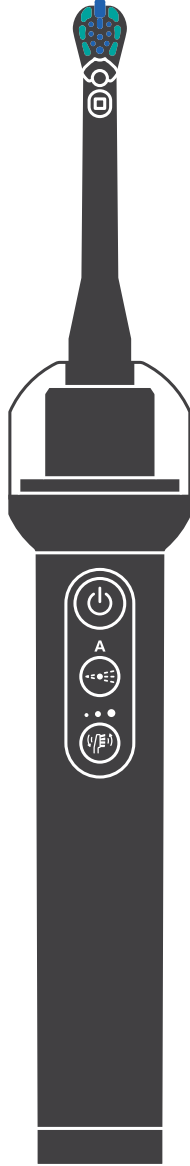

Kullanım kılavuzu

dyson



Dyson CameraJet™ elektrikli diş fırçası ve hassas diş arası temizleyicisi

Dolum ünitesi

Çift etkili diş fırçası başlığı	1
Konik jet	2
Kamera	3
Su çıkış noktası	4
Yer çekimsiz hazne	5
Güç düğmesi	6

Jet düğmesi	7
Fırçalama yoğunluğu düğmesi	8
Diş fırçası sapı	9
Pil göstergesi	10
Manyetik şarj bağlantı noktası	11
USB-C şarj cihazı	12

Ünite doldurma düğmesi	13
Ünite hazne kapağı	14
Hazne dolum uçları	15
Ünite haznesi	16
Şarj tabanı	17
Ünite taban plakası	18
Seyahet çantası	19

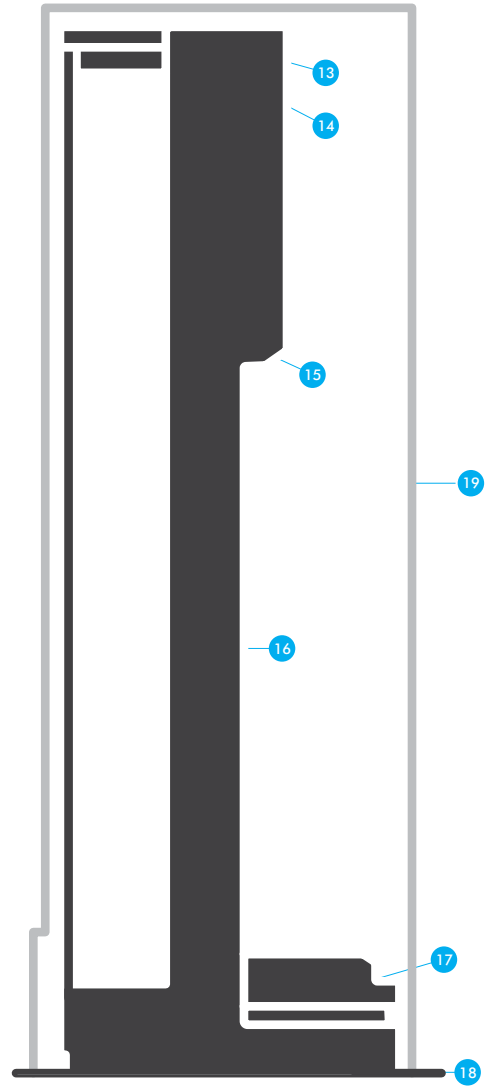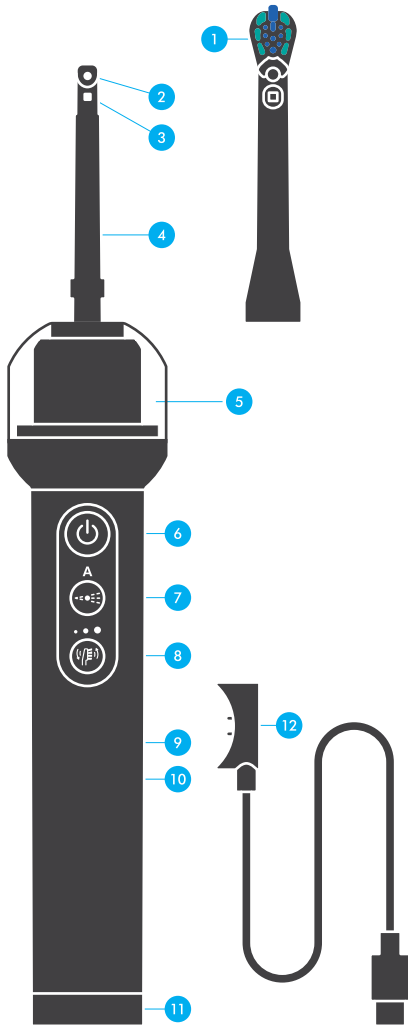

MyDyson™ uygulamasıyla eşleştirme

Canlı görüntüleme ve Rehberli temizlik gibi uygulama bağlantılı özelliklerden yararlanmak için diş fırçanızı MyDyson™ uygulamasına bağlamanızı öneririz. Ürününüzü uygulamaya bağlamak, düzenli hata düzeltmeleri ve işlevsel özellik iyileştirmeleri ile diş fırçanızın yazılımını güncel tutmanızı da sağlayacaktır.

Uygulamaya bağlanma

1. Diş fırçanızın açık ve aktif durumda olduğundan emin olun. Güç/Jet/Fırçalama yoğunluğu düğmelerinin üzerindeki LED'lerden bir veya daha fazlasının beyaz renkte yanıyor olması gerekir.
2. Bağlantının başarılı olması için mobil cihazınızda hem Bluetooth® hem de Wi-Fi'nin etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıca, cihaz ayarlarınızda MyDyson™ uygulamasının Bluetooth® iznine sahip olduğunu doğrulayın.
3. MyDyson™ uygulamasını açın ve MyDyson™ hesabınıza giriş yapın veya gerekirse yeni bir hesap oluşturun.
4. Alttaki navigasyon menüsünde yer alan "Ürünlerim" bölümüne gidin ve "Ürün Ekle"yi seçin.
5. Mobil cihazınızı diş fırçanızın yanında tutun. Diş fırçanız şimdi mobil cihazınızı arayacaktır.
6. Uyarı geldiğinde, Fırçalama yoğunluğu düğmesine basın. Bunu yapmanız, eşleştirme işlemi aktifleştirir.
7. Bağlantı doğrulanırken lütfen bekleyin.
8. İstendiğinde Wi-Fi ağınıza seçin ve şifrenizi girin. Bağlantı onaylanana kadar bekleyin.
9. Gizlilik onayını inceleyin ve uygulama içi kurulum adımlarını tamamlayın.
10. Artık hazırsınız.

Canlı görüntülemeyi ayarlama

1. Canlı görüntüleme özelliğine bağlanmak için diş fırçanızın açık ve aktif olduğundan (Güç/Jet/Fırçalama yoğunluğu düğmelerinin üzerindeki LED'lerden biri veya daha fazlası beyaz renkte yanmalıdır) ve mobil cihazınızda hem Wi-Fi hem de Bluetooth®'un etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
2. Ayrıca, diş fırçanızın pil seviyesinin %20'nin üzerinde olduğundan emin olun; aksi takdirde Canlı görüntüleme özelliğine bağlanamazsınız.
3. Son olarak, orijinal Dyson çift etkili fırça başlığınızın sıkıca takıldığından emin olun; yerine düzgünce oturduğunda bir "tık" sesi duyulacaktır.
4. MyDyson™ uygulamasını açın. Artık bir Canlı görüntüleme oturumu başlatmaya hazırsınız.

Canlı görüntülemeyi başlatmak için

1. Canlı görüntüleme kutucuğuna dokununuz.
2. Mobil cihazınızı diş fırçanızın yakınına getirin.
3. İstendiğinde "Katıl" seçeneğine dokununuz. Bu, mobil cihazınızın diş fırçasının ağına bağlanmasını sağlayacaktır.
4. İstendiğinde bağlantınızı onaylamak için diş fırçasındaki Fırçalama yoğunluğu düğmesine basın; bunun amacı, canlı görüntüleme özelliğini başlatırken diş fırçasının yanınızda olduğundan emin olmaktır.
5. Hala canlı görüntüleme oturumu başlatamıyorsanız MyDyson™ uygulamasını kapatıp yeniden açın ve canlı görüntüleme özelliğine yeniden bağlanmayı deneyin.




Uygulama işlevi, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. MyDyson™ uygulaması için işletim sistemi ve mobil cihaz gereksinimlerini App Store veya Google Play'de bulabilirsiniz.

Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan bir hizmet markasıdır.


Google Play, Google Play logosu ve Google Asistan, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

İlk kurulum


1. USB-C kablosunu ünitenin tabanından geçirin ve ardından bağlayın. Yanıp sönen beyaz ışık, şarj olduğunu gösterir.

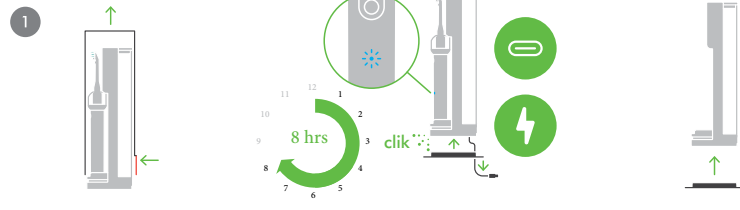


2. Ünite haznesinin kapağını çıkarın ve mevcutsa Dyson ağız bakım suyu veya alternatif bir az köpüren ağız bakım suyu ile doldurun.

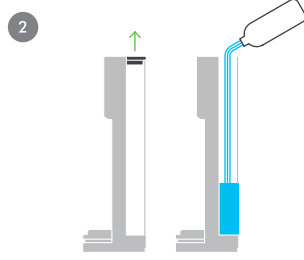


3. Diş fırçasını üniteye yerleştirin, şarj pimlerinin kenetlendiğinden ve dolum uçlarının doğru şekilde hizalandığından emin olun.

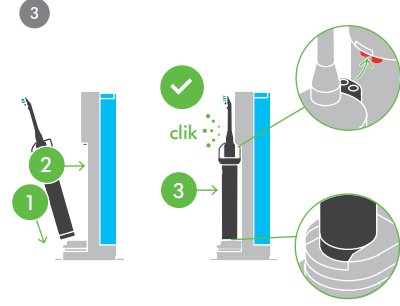

4. Ünitedeki doldurma düğmesini basılı tutun.

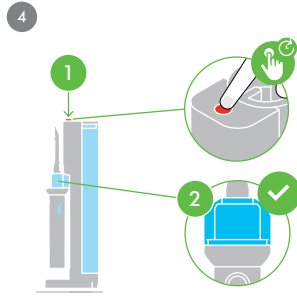


5. Diş fırçasınızı hazırlamak için Güç düğmesine basın ve ardından jet püskürtmesi başlayana kadar Jet düğmesini basılı tutun.

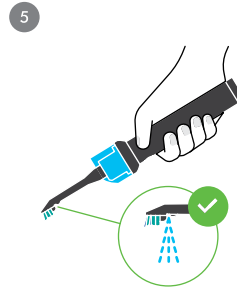

Dolum ünitesi


Ünite haznesinin yeniden doldurulması

1. Ünite haznesinin kapağını yukarı çekerek çıkarın.
2. Mevcutsa Dyson az köpüren ağız bakım suyu veya alternatif bir az köpüren ağız bakım suyu ile doldurun.
3. Ünite haznesinin kapağını sıkıca yerine oturana kadar itin.

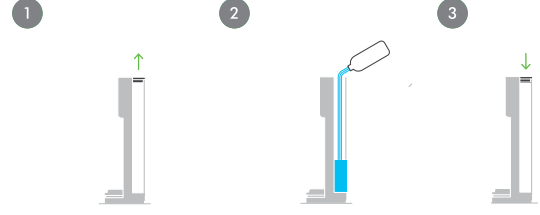

Diş fırçasının ünite üzerinde şarj edilmesi ve yeniden doldurulması

1. Şarj etmeden önce, diş fırçasının şarj temas noktalarında ve ünite üzerindeki şarj pimlerinde nem, toz veya kir olmadığından emin olun. Nemi, toz veya kir varsa silerek temizleyin.
2. Diş fırçasını, üzerindeki düğmeler üniteye bakmayacak şekilde şarj tabanına yerleştirin.
3. Diş fırçasını şarj tabanına doğru itin, fırça haznesinin dolum deliklerini ünitenin dolum uçlarıyla hizalayın ve bırakın.
4. Diş fırçasının haznesini doldurmak için ünitenin üstündeki doldurma düğmesini basılı tutun. Fazla sıvı, ünitenin haznesine geri yönlendirilecektir.
5. Diş fırçasını çıkarmak ve şarjı durdurmak için diş fırçasını yaylı tabana doğru, aşağıya iterek ünitiden çıkarın.

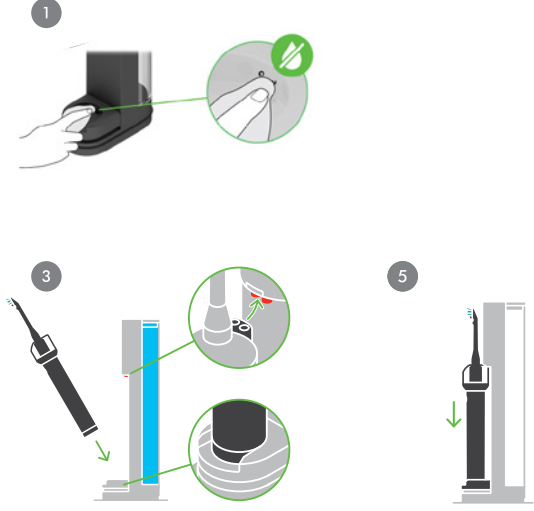

Diş fırçasının saklanması


Saklamadan önce diş fırçasının ve dolum ünitesinin kuru olduğundan emin olun.

Diş fırçasını dolum ünitesinde saklamak için gösterildiği gibi ünitenin üzerine yerleştirin ve seyahat kılıfını, klipsi arkaya bakacak şekilde yerine oturana kadar kaydırın.

Başlangıç

Güç düğmesine basın. Kamerayı etkinleştirmek için "A" sembolü 6-8 saniye yanıp sönecek ve hazır olduğunda sabit beyaz renkte yanacaktır.

Diş fırçasınız varsayılan olarak Fırçalama ve Auto-jet modunda çalışacaktır. Temizlemeyi başlatmak için güç düğmesine basın.

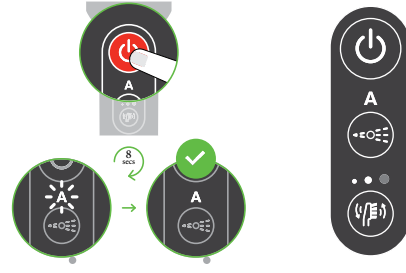

Modlar

Diş fırçasının 3 modu bulunmaktadır

Her fırçalama modunda seçebileceğiniz üç yoğunluk seviyesi vardır: Hassas, Değişken ve Derin temizlik. Jet düğmesine basarak jet püskürtmesini istediğiniz zaman etkinleştirebilirsiniz.


Modları değiştirme

Jet düğmesi

Diş fırçası kapalıyken Auto-jet'i (LED açık) veya Manuel jet (LED kapalı) etkinleştirmek için düğmeye basın.

Fırçalama yoğunluğu düğmesi

Hassas, Değişken ve Derin temizlik fırçalama yoğunlukları arasında geçiş yapmak için düğmeye basın.

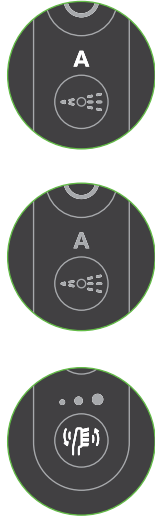

Modlar için rehberiniz

Fırçalama ve Auto-jet modu (Önerilir)

aynı anda dişleri fırçalar ve su jetiyle temizler.

Auto-jet modu


Fırçalama olmadan su jetiyle temizler.

Bu moda erişmek için Auto-jet'i açın ve fırçalama yoğunluğunun seçili olmadığından emin olun.


Fırçalama modu

Auto-jet olmadan dişleri fırçalar.


Bu moda erişmek için Auto-jet'i kapatın.

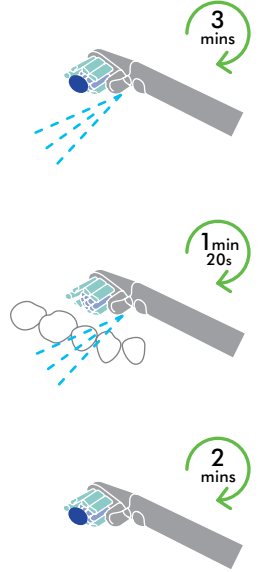


Fırçalama teknikleri

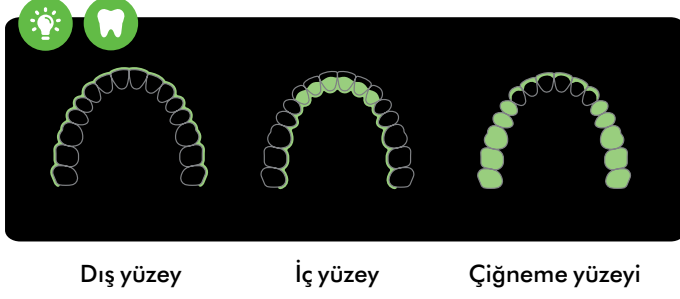

1. Üst ve alt çeneyi; sol, sağ ve orta olmak üzere üç bölüme ayırın.
2. Temizlemek için bir bölüm seçin. Dış yüzeyden başlayın. Diş fırçasını yatay olarak tutun ve fırça başlığını küçük, oval, ileri geri hareketlerle dişlerin üzerinde gezdirin.

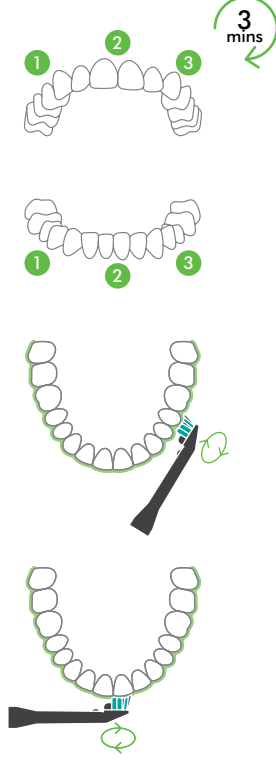


3. Aynı fırçalama hareketini kullanarak iç yüzeye ve ardından çiğneme yüzeyine geçin.
4. Ön dişlerin içini fırçalarken fırçayı hafif dik konuma getirin ve her dişi, yukarı ve aşağı hareketlerle fırçalayın.
5. Zamanlayıcı, bir sonraki bölüme geçme zamanını bildirmek için diş fırçasını titretecektir.

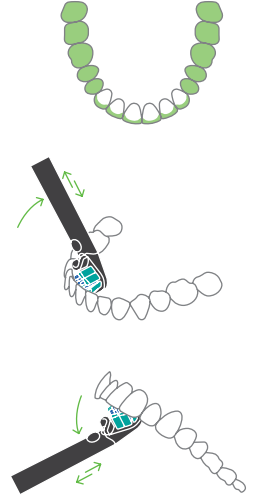

Kullanım

1. Diş fırçası başlığını dişlerinize düz bir şekilde yerleştirin. Çene hattını takip etmek için yatay bir şekilde tutun.
2. Çalıştırmaya başlamak için Güç düğmesine basın.
3. Gerekirse diş fırçasını duraklatmak için Güç düğmesine tekrar basın. Fırçalamaya devam etmek için Güç düğmesine tekrar basın.
4. Temizleme döngüsü tamamlandığında diş fırçası otomatik olarak kapanır.

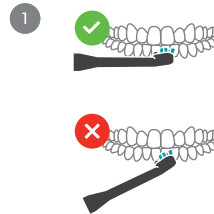

Gösterge ışıkları

Gösterge	Anlamı
A	Auto-jet özelliği kapalı veya devre dışı
A	Auto-jet özelliği açık
AA	Auto-jet özelliği başlatılıyor
A	Auto-jet özelliği açık ve boşluk algılama aktif
●●●	Fırçalama özelliği kapalı (Yalnızca Auto-jet açıkken kullanılabilir)
○●●	Fırçalama yoğunluğu seviyesi 1 (Hassas)
○○●	Fırçalama yoğunluğu seviyesi 2 (Değişken)
○○○	Fırçalama yoğunluğu seviyesi 3 (Derin temizlik)
●●● 2,5 saniye boyunca	Fırça başlığı doğru şekilde takılmış
○●●●○●●●○	Cihaz yazılımı yükleniyor
●●●●●●●●	Bağlantı kuruluyor (ör. uygulama eşleştirme, Wi-Fi ağına bağlanma)
○○○ 2 saniye boyunca	Yazılım güncellemesi başarıyla tamamlandı
●●● 2 saniye boyunca	Uygulama bağlantısı başarıyla kuruldu
●●● 2 saniye boyunca	Uygulama bağlantısı veya yazılım güncellemesi başarısız oldu
●	Pil şarjı %25'ten fazla veya tamamen dolu (şarj cihazı bağlıyken)
● Yavaş yanıp sönme	Pil şarjı %25'ten az
● Hızlı yanıp sönme	Pil şarjı %5'ten az
● Yanıp sönme, ardından kapanma	Pilin şarjı bitmiş
○	Şarj etme


Diş fırçası özellikleri

Diş fırçası, sizi bilgilendirmek için dokunsal geri bildirim özelliği kullanır.


Özellik	Gösterge	Anlamı
Zamanlayıcı	Kısa bir ses ve titreşim	Dişlerin bir sonraki bölümüne geçin
Aşırı basınç algılama	Kısa, sürekli darbeler	Çok fazla basınç uygulanıyor
Aşırı bastırma algılama	Tekrar eden bir ses	Düz bir ileri geri hareketle fırçalama algılandı. Bu önerilmiyor.
Gösterge	Anlamı	Eylem
A+ ●●●●	Aşırı bastırma uyarısı devre dışı bırakıldı. Aşırı basınç uyarısı etkinleştirildi .	Diş fırçası şarj olurken göstergeler yanana kadar Jet düğmesine ve Fırçalama yoğunluğu düğmesine aynı anda basın.
A+ ●●●●	Aşırı bastırma uyarısı etkinleştirildi . Aşırı basınç uyarısı devre dışı bırakıldı.	Seçenekler arasında geçiş yapmak için işlemi tekrarlayın.
A+ ●●●●	Aşırı bastırma uyarısı devre dışı bırakıldı. Aşırı basınç uyarısı devre dışı bırakıldı.	
A+ ●●●●	Aşırı bastırma uyarısı etkinleştirildi . Aşırı basınç uyarısı etkinleştirildi .	
●●●● 2,5 saniye boyunca	Bağlantı etkinleştirildi .	Diş fırçası şarj olurken bağlantıyı açmak veya kapatmak için Fırçalama yoğunluğu düğmesini dört saniye basılı tutun.
●●●● Yanıp sönmeye, ardından kapanma	Bağlantı etkinleştirildi .	

Üniteyi kullanmadan fırça haznesini doldurma

1. Giriş kısmını ortaya çıkarmak için hazneyi çevirmeden yukarı doğru kaydırın.
2. Mevcutsa Dyson az köpüren ağız bakım suyu veya alternatif bir az köpüren ağız bakım suyu ile doldurun.
3. Hazneyi diş fırçasının sapına doğru iterek yerine takın.

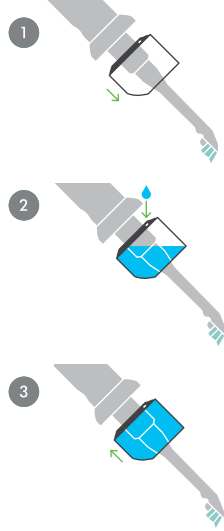


4. Fırça başlığını lavaboya doğru çevirerek tüm hava boşaltılana ve sıvı çıkışı başlayana kadar Jet düğmesini basılı tutun.
5. Diş fırçasınız artık kullanıma hazırdır. Mümkünse Dyson köpürmeyen diş macununu veya köpürmeyen alternatif bir ürün kullanın. Kamera lensinin üstünün kapalı olmadığından emin olun.

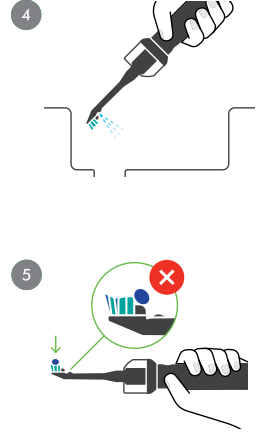


Üniteyi kullanmadan şarj etme

1. Şarj etmeden önce, diş fırçasının ve şarj kablosunun şarj temas noktalarında nem, toz veya kir bulunmadığından emin olun.
2. USB-C şarj kablosunu listelenen/onaylı bir USB-C güç adaptörüne takın ve kabloyu diş fırçasının şarj temas noktalarına bağlayın. Diş fırçasını dik bir konuma yerleştirin.

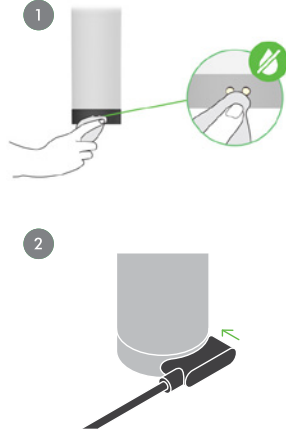

3. Diş fırçasının şarj olduğunu doğrulamak için pil göstergesini kontrol edin.
4. Şarj kablosunu diş fırçasının sapından çıkarmak için bağlantı ucunu tutun ve diş fırçasının sapından nazikçe çekin.

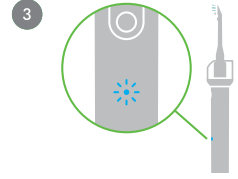

Diş fırçasınızla seyahat


Seyahate çıkmadan önce, Uyku modunu etkinleştirmek için Güç düğmesine iki saniye boyunca basın. Diş fırçasını uyandırmak için Güç düğmesine tekrar basın.



Genel temizlik talimatları

Her kullanımdan sonra


1. Fırça başlığını çıkarın ve akan suyun altında yıkayın.
2. Hazneyi çevirmeden çıkarın. Hazneyi yıkayın.
3. Dış fırçasının dış yüzeylerini yıkayarak temizleyin.
4. Sıvı çıkışı durana kadar Jet düğmesini basılı tutun.
5. Dış fırçasının dış yüzeylerini kurulayın.
6. Bir sonraki kullanıma kadar fırça başlığının tamamen kurumasını bekleyin.

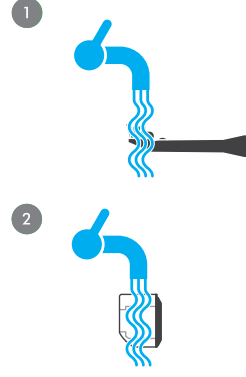

Haftalık temizlik talimatları


Dış fırçası

1. Fırça başlığını çıkarın.
2. Hazneyi çıkarın.
3. Fırça başlığını, su çıkış noktasının uç kısmını ve fırça sapının tamamını, özellikle giriş filtresini, fırça başlığı bağlantısını ve şarj temas noktalarını akan suyun altında iyice yıkayın.
4. Dış fırçasını lavaboya doğru çevirin ve su çıkış noktasından sıvı çıkışı durana kadar Jet düğmesini basılı tutun.
5. Dış fırçasının tüm dış yüzeylerini nemli bir bezle silin ve kurumaya bırakın.

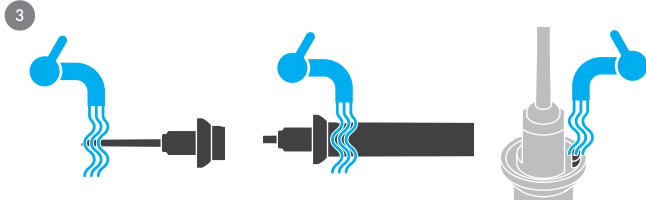

Dolum Ünitesi


1. Dış fırçasını üniteden çıkarın. Ünite haznesinin kapağını çıkarın.
2. Ünitenin haznesini boşaltın.
3. Şarj tabanına bir kap yerleştirin.
4. Haznedeki tüm suyu boşaltmak için Doldurma düğmesine iki kez basın.
5. Ünitenin güç kaynağını çıkarın.
6. Hazneyi nazikçe temizlemek için ılık su, yumuşak bir sabun ve yumuşak bir şişe fırçası kullanın.
7. Hazneyi akan suyun altında durulayın ve dış yüzeyleri silerek kurulayın.
8. Şarj pimlerini ve şarj tabanını, nemli bir bezle temizleyin ve kurulayın.
9. Dolum ucundaki kir veya birikintileri silerek temizleyin.

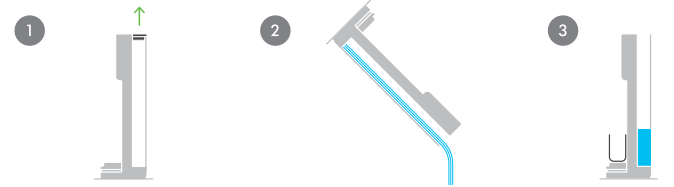

Haftalık temizlik talimatları

Hazne

1. Hazneyi diş fırçasından çıkarın.
2. Uygun bir kaba sıcak, kaynamış su dökün.
3. Isıya dayanıklı bir mutfak aleti kullanarak hazneyi dikkatlice suyun içine daldırın.
4. Haznenin suyla dolmasını ve en az 30 saniye bu şekilde kalmasını sağlayın.
5. Hazneyi çıkarmadan önce suyun soğumasını bekleyin.
6. Hazneyi hafifçe sallayarak fazla suyu giderin ve kurumaya bırakın.

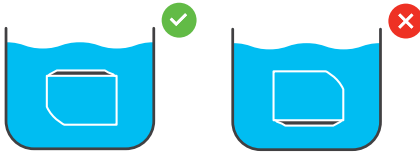


Ünitedeki sert su birikintilerini temizlemek için

1. Haznenin dörtte birine kadarını beyaz sirke (asitlik oranı %5) doldurun.
2. Şarj tabanına bir kap yerleştirin.
3. Ünite haznesindeki tüm sirkeyi boşaltmak için Ünite düğmesine iki kez basın.
4. 1'den 3'e kadar olan adımları, sirke yerine içme suyu kullanarak tekrarlayın. Sirke kalıntısı kalmayana kadar bu işlemi en az iki kez tekrarlayın.
5. Üniteyi kurumaya bırakın.

Aylık temizlik talimatları

Dyson ağız bakım suyu kullanmanızı öneririz. Ancak, bunun mümkün olmadığı durumlarda veya diş fırçasında su kullanıldığında, suyun sertliğine bağlı olarak sert su birikintileri oluşabilir. Bu durum, diş fırçasının performansını etkileyebilir. Eğer suyun sert olduğu bir yerde yaşıyorsanız aşağıdaki talimatları aylık olarak uygulayın.


1. Hazneyi ve fırça başlığını çıkarın.
2. Beyaz sirke (asitlik oranı %5) içeren bir kap hazırlayın ve su çıkış noktasını 5 dakika boyunca bu sirkenin içinde bekletin.
3. Su çıkış noktasını akan suyun altında hazneyi durulayın.
4. Su çıkış noktasını kurulayın.
5. Hazneyi beyaz sirke (asitlik oranı %5) ile doldurun.
6. Hazneyi diş fırçasının sapına takın.
7. Diş fırçasını lavaboya doğru çevirin, ardından hazne tamamen boşalana ve diş fırçasından sıvı çıkışı durana kadar Jet düğmesini tekrar tekrar basılı tutun.
8. Hazneyi çıkarın ve kalan solüsyonu boşaltın.
9. 5'ten 8'e kadar olan adımları, sirke yerine içme suyu kullanarak tekrarlayın. Sirke kalıntısı kalmayana kadar bu işlemi en az iki kez tekrarlayın.
10. Haznenin dış yüzeylerini temiz bir bezle silin.
11. Kurumaya bırakın.

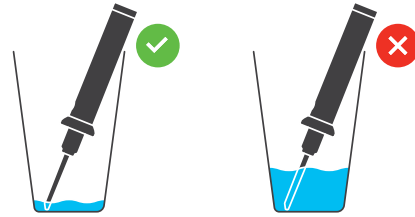

Bakım ve onarım


Fırça başlığını her üç ayda bir değiştirmeniz önerilir. Bunu yapmak için eski fırça başlığını dış fırçasının sapından kaydırarak çıkarın ve yeni fırça başlığını yerine oturana kadar sıkıca itin.

Pil değişimi için yalnızca Dyson pil Parça Numarası 975294'ü kullanın. Diğer pil türleri uyumlu değildir ve ciddi arızalara yol açabilir.

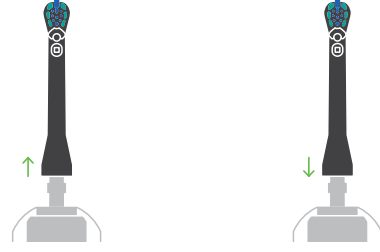

Pili değiştirmek için:

1. Pili çıkarmadan önce USB-C şarj kablosunu çıkarın ve Güç düğmesini iki saniye basılı tutarak dış fırçasının Uyku modunda olduğundan emin olun. Dış fırçasını hareket ettirerek Uyku modunda olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir gösterge ışığı yanıyorsa dış fırçası Uyku modunda değildir.
2. Dış fırçasının tabanındaki yapışkan etiketi çıkarın, T6 tornavida kullanarak vidayı sökün ve pili dış fırçasının sapından dışarı kaydırarak çıkarın.
3. Yeni pili, dış fırçası sapının tabanındaki pil bölmesindeki ilgili U şeklindeki işarete hizalayarak, bağlantı ucunun doğru kutuplara oturmasını sağlayın ve pili içeri doğru iterek takın.
4. Vidayı takıp sıkın, ancak aşırı sıkmamaya dikkat edin, ardından yapışkan etiketi pilin tabanına geri yapıştırın.

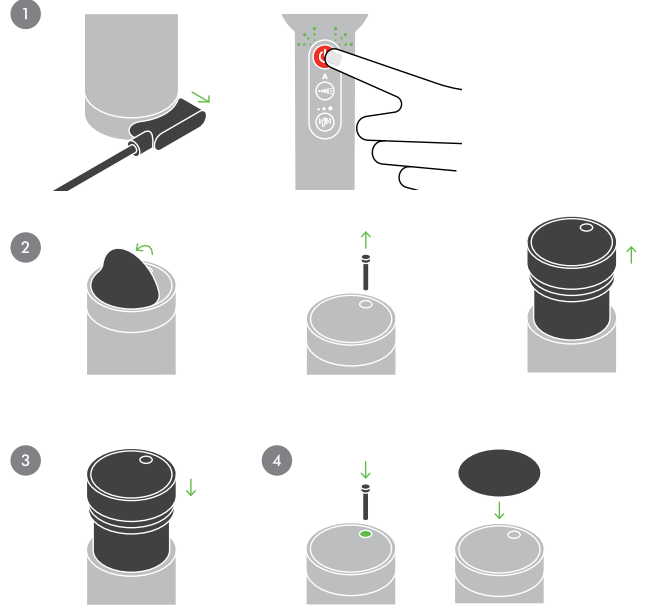

⚠ DİKKAT: Verilen vida dışında başka bir vida kullanmayın.

⚠ DİKKAT: Pil çıkarıldığında, kısa devre oluşmasını önlemek için pil uçlarını yalıtılmış halde ve metal nesnelerden uzak tutun.

- Kullanılmış pili, yerel düzenlemelere veya yönergelere uygun şekilde atın.
- Değiştirilmiş veya hasarlı pilleri kullanmayın. Değiştirilmiş veya hasarlı piller patlayabilir ve kişilerin yaralanmasına yol açabilir.
- Dış fırçası uzun süre kullanılmadan saklanacaksa pili çıkarılmalıdır.

Sorun giderme

Gösterge	Anlamı	Önerilen işlem
A	Hazne boş	Hazneyi doldurun
A Yanıp sönme	Görüş engellendi	Kameranın üzerinde kir veya çizik olup olmadığını kontrol edin
A Yanıp sönme	Fırça başlığı veya pil sorunu nedeniyle Auto-jet özelliği devre dışı bırakılmıştır	Pil ve fırça başlığının Dyson pil ve fırça başlığı ile değiştirilmesi önerilir
A	Kamera sorunu nedeniyle Auto-jet özelliği devre dışı bırakılmıştır	Gösterge 15 dakika sonra hala yanıyorsa Dyson destek ile iletişime geçin
● ● ● Yanıp sönme	Yıpranmış fırça başlığı takılı	Fırça başlığını değiştirin
A Yanıp sönme + ● ● ● Yanıp sönme	Dyson tarafından üretilmemiş bir fırça başlığı takılı	Dyson fırça başlığı kullanılması önerilir
● ● ● İki kez yanıp sönme	Fırça başlığı takılı değil	Fırça başlığını takın
A Yanıp sönme + ● Kesintisiz	Dyson tarafından üretilmemiş bir pil takılı	Dyson pili kullanılması önerilir
● Yanıp sönme, ardından kapanma	Pilin şarjı bitmiş	Pili tekrar şarj edin
● İki kez yanıp sönme	Sıcaklık çok yüksek	Soğuması için bekleyin
● İki kez yanıp sönme	Sıcaklık çok düşük	Isınması için bekleyin
Pil göstergesi kapalı ve Güç düğmesine basıldığında açılmıyor	Pil veya şarj arızası	Şarj kablosunu veya üniteyi çıkarıp yeniden takın
● 5 saniye boyunca yanıp sönme	Kritik arıza	Güç düğmesini dokuz saniye basılı tutun; bu işlem sorunu çözmezse Dyson destek ekibiyle iletişime geçin
● 5 kez iki kez yanıp sönme	Pil hatası	Pili değiştirin veya Dyson destek ekibiyle iletişime geçin

Temizlik oturumu verileri MyDyson™ uygulamasında senkronize edilmiyor

Temizlik oturumlarınızı yükleyemiyorsanız dış fırçanızın Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

Ayrıca, mobil cihazınızda Bluetooth® ve Wi-Fi'nin etkinleştirildiğinden emin olun. MyDyson™ uygulamasının bağlanabilmesi için Bluetooth® ve Wi-Fi gereklidir.

Dış fırçanız Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra, üzerindeki fırçalama verilerinin uygulamanıza yüklenebilmesi için dış fırçanızı şarj edin.

Son olarak, geçmiş temizlik oturumu verilerinizi ve trendlerinizi görebilmek için "Size Özel Öneriler" için izin verdiğinizden emin olun. Uygulamanın Ürün Ayarları bölümüne giderek gizlilik ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

Temizlik oturumları halen yüklenmiyorsa uygulamayı kapatıp yeniden açın ve dış fırçanızın Bluetooth® ve Wi-Fi bağlantısını kapatıp tekrar açarak sıfırlayın ve yeniden bağlanmasını sağlayın. MyDyson™ uygulaması açıldıktan sonra bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir. Üç noktanın tümü sarı renkte yanıyorsa sıfırlama girişimi başarısız olmuştur. İşlemi tekrarlamanız gerekebilir.

Sorun giderme

Makine şarj olmuyor

Diş fırçası şarj cihazına bağlı ancak pil şarj olmuyorsa lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1. Şarj cihazınızı fişten çekin, ardından tekrar prize takın ve elektrik prizinin çalıştığından emin olun. Alternatif bir USB-C güç adaptörüne erişiminiz varsa onu kullanın.
2. Diş fırçasındaki şarj temas noktalarında herhangi bir aşınma belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir aşınma fark ederseniz, haftalık temizlik bakım adımlarını uygulayın. Birikintileri gidermek için diş fırçasının tabanındaki şarj temas noktalarının duruladığınızdan emin olun ve silerek kurulayın.
3. Şarj kablosunu kullanırken pil göstergesi sabit beyaz renkte yanmıyorsa bunun yerine Dolum ünitesini kullanarak şarj etmeyi deneyin.

Auto-jet çalışmıyor

Auto-jet temizlik sırasında beklediğiniz gibi çalışmıyorsa gösterge durumunu kontrol edin. Auto-jet yalnızca **A** göstergesi yeşil yandığında çalışır.

1. Auto-jet devre dışı (Auto-jet gösterge ışığı kapalı)
 - Sadece fırça kolları hareket ediyorsa bu, makinenizin “sadece fırçalama” modunda olduğunu gösterir.
 - Temizliği durdurun.
 - Auto-jet’i etkinleştirmek için Jet düğmesine bir kez basın.
2. Temizleme modunda değil (Auto-jet gösterge ışığı beyaz).
 - Başlatmak için Güç düğmesine basın.
3. Auto-jet aktif (Auto-jet gösterge ışığı yeşil)
 - Auto-jet normal çalışıyor.
 - Performans hala tatmin edici değilse diş fırçalama tekniğinizi gözden geçirin. En iyi sonuçları elde etmek için MyDyson™ uygulamasındaki fırçalama tekniği rehberini izleyin.
4. Hazne boş (Auto-jet gösterge ışığı sarı)
 - Temizliği durdurun.
 - Hazneyi çevirmeden çıkarın.
 - Hazneyi manuel olarak veya Dolum ünitesini kullanarak doldurun.
5. Kamera engellendi (Auto-jet gösterge ışığı sarı renkte yanıp sönüyor).
 - Kamera lensi buğulanma, kalıntılar veya çiziklerden etkilenebilir.
 - Dyson tarafından üretilmemiş diş macunu kullanmak, kamera lensinin üzerinde köpük birikimine neden olabilir (ağzınızda diş macunu ile biriken sıvıyı düzenli olarak tükürün).
 - Kamera lensinin bulunduğu alanı ve fırça başlığının iç kısmını yıkayın.
 - Su çıkış noktasını yıkayın.
6. Kamera veya sistem sorunu (Auto-jet gösterge ışığı kırmızı).
 - Diş fırçası otomatik olarak normale dönmelidir.
 - Gerekirse gösterge ışıkları kapanıp tekrar açılana kadar Güç düğmesini dokuz saniye basılı tutarak diş fırçasını sıfırlayın.
7. Uyumsuz fırça başlığı (Auto-jet göstergesi iki kez kırmızı yanıp söner; yoğunluk ışıkları sarı yanıp söner)
 - Yalnızca orijinal Dyson fırça başlıklarının ve aksesuarlarının kullanıldığından emin olun.
8. Dyson tarafından üretilmemiş pil (Auto-jet göstergesi iki kez kırmızı yanıp söner; pil ışığı sarı yanar).
 - Uyumlu bir Dyson pili ile değiştirin.

Faydalı ipuçları

- Kamera lensini ve fırça başlığını düzenli olarak temizleyin.
- Kullanmadan önce fırça sapının ve başlığın kuru olduğundan emin olun.
- Filtre bölgesini temizlemek için hazneyi çıkarın.

Sorun giderme

Düşük Auto-jet performansı

Temizlik sırasında uygulanan Auto-jet sayısının düşük olduğunu fark ederseniz bir sonraki temizlik oturumunuzda bunu iyileştirmek için deneyebileceğiniz birkaç yöntem vardır.

1. Fırça başlığını her zaman dişlere yatay olarak hizalayın.
2. Kameranin her boşluğu algılayabilmesi için diş fırçanızı yavaşça hareket ettirin.
3. Ön dişlerinizi temizlerken kameranın görüşünü engellememesi için dudaklarınızı aralayın.
4. Kameranin görüşünü net tutmaya yardımcı olmak için ağızınızda diş macunu ile biriken sıvıyı düzenli olarak tükürün.
5. Köpükler, kamera lensinin görüşünü engelleyebileceğinden Dyson diş macunu veya köpürmeyen alternatif bir ürün kullanın.
6. Kameranin en iyi şekilde görmesini ve boşlukları algılamasını sağlamak için lens kapağını temiz tutun. Püskürtme özelliği sınırlı olarak çalışıyorsa Güç düğmesine basarak temizleme işlemini duraklatın, fırça başlığını çıkarın, lensi silerek temizleyin, fırça başlığını geri takın ve Güç düğmesine basarak temizlemeye devam edin.

Ayrıca, MyDyson™ uygulamasındaki "Temizlik Oturumu" sekmesini kullanarak her oturumdaki Auto-jet kapsamınızı görebilirsiniz. Auto-jet kapsamı haritası, ağızınızın altı bölgesinin her birine kaç adet Auto-jet uygulandığını gösterir.

Diş fırçanızı sıfırlamak için

Diş fırçanız herhangi bir tepki vermiyorsa Güç düğmesini yaklaşık dokuz saniye boyunca basılı tutun. Gösterge ışıkları söndükten sonra basılı tutmaya devam edin ve yalnızca tekrar yandığında bırakın. Bu işlem, diş fırçasını sıfırlayarak normal işlevselliğini geri kazandıracaktır. Diş fırçası şarj olmayı durdurursa USB-C şarj kablosunu çıkarın ve şarj işlemini yeniden başlatmak için tekrar bağlayın.

Diş fırçası bir pil hatası veya kritik bir arıza gösteriyorsa ya da açılmıyorsa Dyson destek ile iletişime geçin.

Ünitede sızıntı var

Diş fırçası, ünite tabanına doğru şekilde hizalanarak yerleştirilmezse diş fırçasının haznesi doldurulurken sızıntı meydana gelebilir.

Hizalamayı sağlamak ve sızıntıyı önlemek için:

1. Diş fırçasını, üzerindeki düğmeler ünitenin tersine bakacak şekilde ünite tabanına yerleştirin.
2. Diş fırçasını ünite tabanına doğru itin, fırçanın hazne doldurma giriş deliklerini ünitedeki dolum ucuna yerleştirin ve bırakın. Diş fırçasının haznesi ile ünitenin doldurma girişi arasında boşluk olmamalıdır. Doğru şekilde üniteye yerleştirildiğinde şarj sesini duymalısınız. Açısal bir hizalama hatası olmadığını doğrulamak için diş fırçasının ünite dolum uçlarına kendiliğinden oturması gerekir.
3. Diş fırçasının haznesini doldurmak için ünitenin üstündeki Doldurma düğmesini bir kez basılı tutun. Fazla sıvı, ünitenin haznesine geri yönlendirilecektir.

Küf veya koku oluşumu

Diş fırçasının herhangi bir parçası küfe maruz kalırsa veya koku yayarsa o parçayı değiştirmelisiniz.

Diş fırçanızı fabrika ayarlarına sıfırlamak için

1. Diş fırçasının açık olduğundan ve pil seviyesinin düşük olmadığından emin olun.
2. Üçüncü nokta (büyük olan) yanana kadar Fırçalama yoğunluğu düğmesini basılı tutun ve ardından bırakın.
3. Ardından, 5 saniye içinde ikinci nokta (ortadaki) yanana kadar Jet düğmesini basılı tutun ve bırakın.
4. Son olarak, 5 saniye içinde Jet ve fırçalama yoğunluğu düğmelerini tüm LED ışıkları sönene kadar aynı anda basılı tutun.
5. Diş fırçası kısa bir süre sonra açılarak fabrika ayarlarına sıfırlamanın başarıyla tamamlandığını gösterecektir.

Üç noktanın tümü sarı renkte yanıyorsa sıfırlama girişimi başarısız olmuştur. İşlemi tekrar denemeniz gerekebilir. Sorun yaşamaya devam etmeniz halinde, Dyson destek ekibiyle iletişime geçin.